


# Инструкция по эксплуатации детских весов "BabyScale RSP-2060B"

## I. Детали весов:

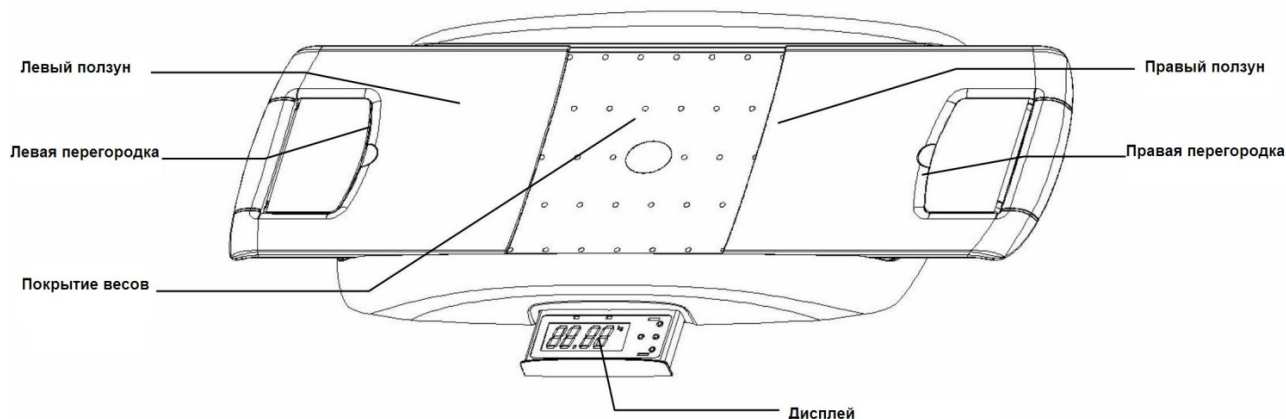

## II. Функции весов:

1. **[ON/OFF]**: ВКЛ/ВЫКЛ весов.
2. **[UNIT]**: Выбор единицы измерения весов, kg, lb, oz.
3. **[HOLD]**: Заморозка результатов взвешивания.

Из-за движения ребенка показания веса на дисплее всё время меняются. Когда показания станут сравнительно стабильными, нажмите кнопку **[HOLD]**, теперь знак «●» будет мигать на левом нижнем краю ЖК-дисплея 3 секунды и весы автоматически вычислят средний вес. Знак «●» станет стабильным, вес и рост ребенка будут указаны на ЖК-дисплее.

4. **[TARE]**: Снятие массы тары.

Чтобы вычесть вес пеленки из показаний весов, сначала положите на весы пеленку и нажмите кнопку **[TARE]** - показания на дисплее обнулятся. Теперь можно приступить к взвешиванию ребенка.

## III. Основные характеристики:

1. Диапазон пределов взвешивания: 200г-20кг  
Дискретность отчета: 5г/0.01lb/0.1oz
2. Диапазон пределов роста: 48см-68см  
Дискретность отчета: 0.1см
3. Синяя подсветка дисплея
4. Автоматическое отключение через 20 секунд
5. Индикация перегрузки: **O-Ld**
6. Индикация разряда: **LO**
7. Элементы питания: 2x1.5v тип AAA
8. Нетто: 2.2кг
9. Рабочая среда: 0°C-40°C RH85%
10. Условия хранения: -10°C-+60°C RH85%

## IV. Подготовка к работе и руководство оператора

1. Распакуйте весы, откройте крышку отсека для батареек.
2. Вставьте 2 элемента питания типа AAA (обращайте внимание на полярность).
3. Установите весы на ровную горизонтальную поверхность.
4. Выдвините дисплей из весов.
5. Выдвините все ползуны и перегородки.
6. Положите пеленку или мягкое полотенце на поверхность весов.
7. Нажмите кнопку [ON/OFF], чтобы включить весы, подождите пока «0.000» появится на дисплее. Если весы уже были включены, нажмите кнопку [TARA], чтобы вычесть вес пеленки из результатов взвешивания.
8. Нажмите кнопку [UNIT], чтобы выбрать единицы измерения: Kg, lb, oz.
9. Положите ребенка на весы, установите раздвижные перегородки так, чтобы они касались головы и ног ребенка.
10. Дождитесь наиболее стабильных показаний на дисплее и нажмите кнопку [HOLD].
11. Вес и рост ребенка отобразятся на дисплее.
12. Нажмите [ON/OFF], чтобы выключить весы. Весы автоматически отключаются через 20 секунд.

## V. Символы:

1. **Символ «LO»:** батареи разряжены. Знак «» напоминает Вам, что мощности батарей не хватает, необходимо заменить батарейки.
2. **Символ «O-Ld»:** перегрузка, вес ребенка превышает 20кг.